



Cyberbloc FP

Cyberbloc FP

primax
INTERNATIONAL

Aparat RTG z ramieniem C

Absolute Operability

Z dowolnej strony, dzięki konsoli z dotykowym ekranem i obrazowi na żywo, operator zawsze ma bezpośrednią kontrolę nad zabiegiem chirurgicznym

Płaski panel detekcyjny

21x21cm z matrycą 1,8 mln. pikseli lub 30x30cm z 3,8 mln. pikseli, w technologii aSi, dla akwizycji wysokorozdzielczych obrazów z niską dawką. Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa dla aplikacji niskodawkowych.

Modulowana moc

Emisja rentgenowska w trybie pulsacyjnym z modulowaną mocą dla najlepszego efektu we wszystkich procedurach. Doskonały stosunek dawki do jakości obrazu.

Stacja obrazowa

Ultra ostre szczegóły, maksymalny zoom 1920x1920 pikseli. Duże obrazy i miniatury w trybie portretowym. Technologia ekranu dotykowego dla łatwego zarządzania obrazami i dokumentami. Dwa 21,5" monitory z ekranami dotykowymi, z regulowaną wysokością i o dużym kącie widzenia.

Kompaktowa konstrukcja

Lekkie, ramię C o dużej średnicy zapewnia łatwy dostęp do stołu operacyjnego. Szybkie, dokładne pozycjonowanie pacjenta i bezwysiłkowe przesuwanie ramienia C. Łatwe przemieszczanie aparatu.



Cyberbloc FP

Zawsze w gotowości

Idealnie wyważony orbitalny i kątowy obrót ramienia C dla szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania. System doskonale reaguje na dotyk i ruchy operatora.

primax
INTERNATIONAL



Ruch orbitalny

Duży zakres ruchu orbitalnego (od +65° do -95°) ułatwia ustawianie projekcji kątowych i bocznych bez konieczności przesuwania aparatu.



Obrót ramienia C

Precyzyjne ruchy ramienia i duże kąty obrotu wokół pacjenta, powyżej $\pm 210^\circ$.



Ruch Góra / Dół

Ramię C ma duży zakres regulacji zmian wysokości (450mm).



Cyberbloc FP

primax
INTERNATIONAL


Siła w Twoim dotyku

Konsola

Funkcjonalnie powiązana z procedurą zabiegową. Wszystkie funkcje są zawsze w zasięgu ręki. Obrazy bieżące lub zapisane są zawsze wyświetlane wraz z wyborem poleceń (*wybierz, edytuj, przenieś, wyślij, przeciągnij, kompresuj, zmniejsz, rozszerz*) ... wystarczy dotknąć ikony, aby włączyć funkcję.

Przegląd obrazów

Aparat pozwala operatorom na natychmiastowy, bezkontaktowy dostęp do funkcji obrazowania. Stacja obrazowa z monitorami w orientacji pionowej, z regulacją kąta i wysokości, aby zapewnić maksymalną widoczność obrazu oraz elementów sterujących. Obrazy są zawsze umieszczone w górnej części ekranu, aby zapewnić optymalną widoczność, a menu i wszystkie elementy sterujące znajdują się w dolnym obszarze ekranu.

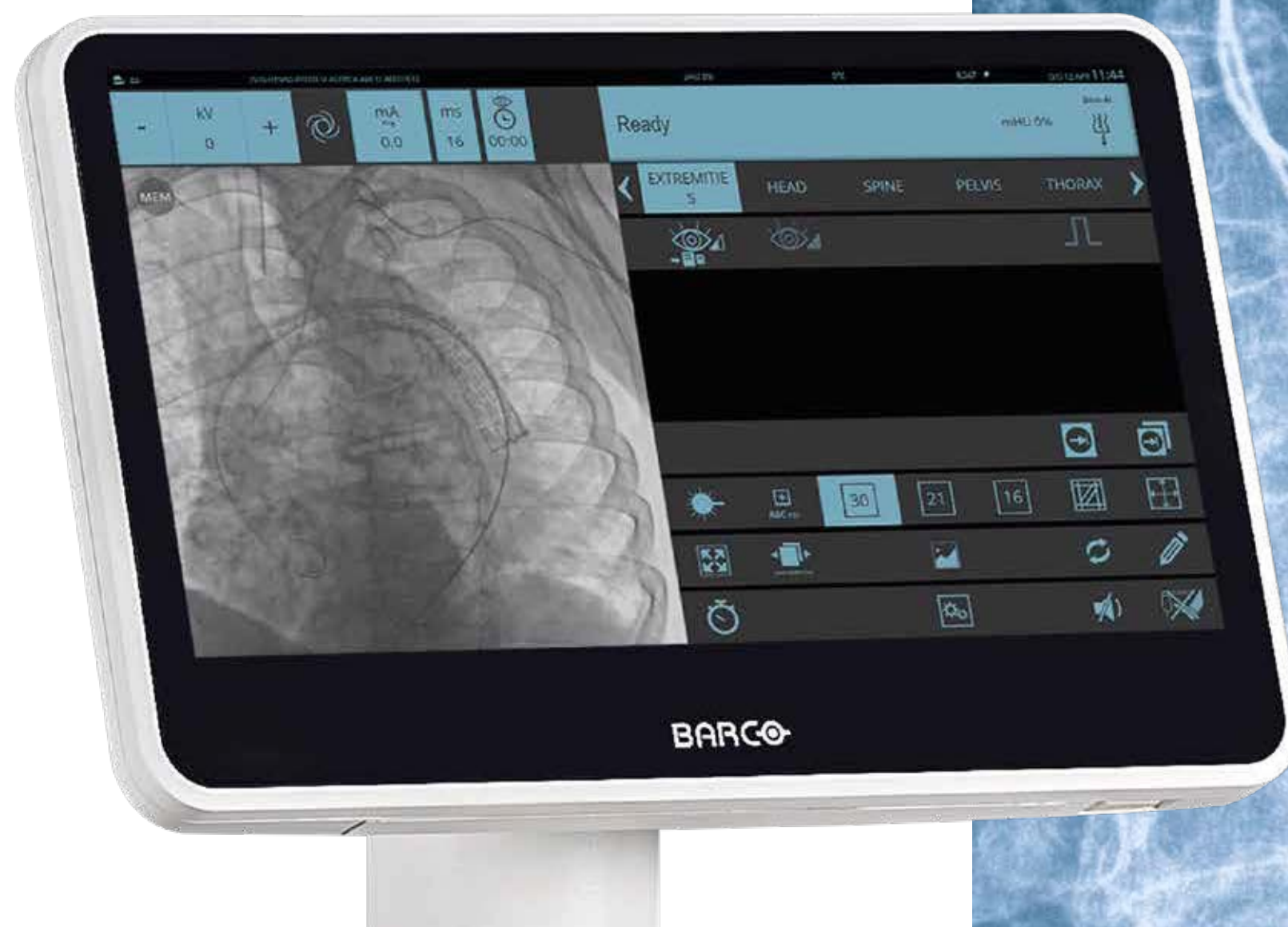

Cyberbloc FP

Ulepszona ergonomia

Lekki, ale mocny, dzięki starannie dobranym materiałom: stopom z metali lekkich, włóknom węglowym, poliuretanowi i specjalnym polimerom.

Wszystkie funkcje są łatwo i szybko dostępne za pośrednictwem ekranu wielodotykowego. Nasz unikalny graficzny interfejs użytkownika działa natychmiastowo, jest intuicyjny i reaguje na gesty wykonane palcami.

primax
INTERNATIONAL




Sterowanie funkcjami za pomocą bezprzewodowego przełącznika nożnego, bez kabli na podłodze.



Zdejmowana kratka przeciwrozprośzeniowa do zabiegów pediatrycznych z niską dawką.



Emisja promieniowania rentgenowskiego jest sterowana za pomocą przełącznika nożnego lub wielofunkcyjnego przełącznika ręcznego

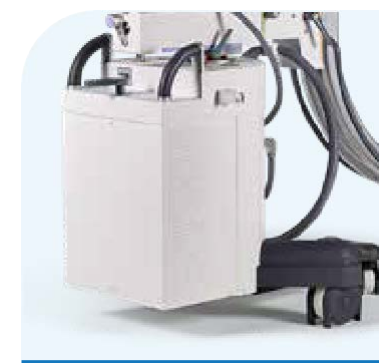

Najlepsza możliwa łączność: USB, Ethernet, HDMI, WiFi.



Centrowanie przy zerowej dawce dzięki lokalizatorom laserowym, zarówno po stronie lampy rentgenowskiej, jak i po stronie detektora z płaskim panelem..



Istant login via the NFC feature.

Cyberbloc FP

primax
INTERNATIONAL

Zawsze, Wszędzie

Globalne wsparcie

Primax International zapewnia wsparcie techniczne dla swoich produktów przez cały okres ich użytkowania, niezależnie od tego, gdzie są eksploatowane.

Zdalne wsparcie

Łączność jest natywna dla Cyberbloc FP, dzięki czemu zdalne wsparcie jest tak proste, jak to tylko możliwe, niezależnie od tego, czy potrzebujesz wykonać testy wydajności, aktualizacje oprogramowania, naprawę czy konserwację.

Wsparcie lokalne

Dla lokalnych przedstawicieli producenta regularnie organizowane są szkoleniowe kursy techniczne. Umożliwiają inżynierom serwisu profesjonalną instalację i obsługę naszego asortymentu.



Cyberbloc FP



primax
INTERNATIONAL

Via Alessandro Volta, 10
24060 Torre de Roveri ITALY
+39 035 4500002
sales@primaxint.com
www.primaxint.com

MEDIX

Dystrybucja i serwis

MEDIX Sławomir Szwed sp.k.
04191 Warszawa ul. Kokoryczki 18
+48 22 5169860
info@medix.com.pl
www.medix.com.pl