


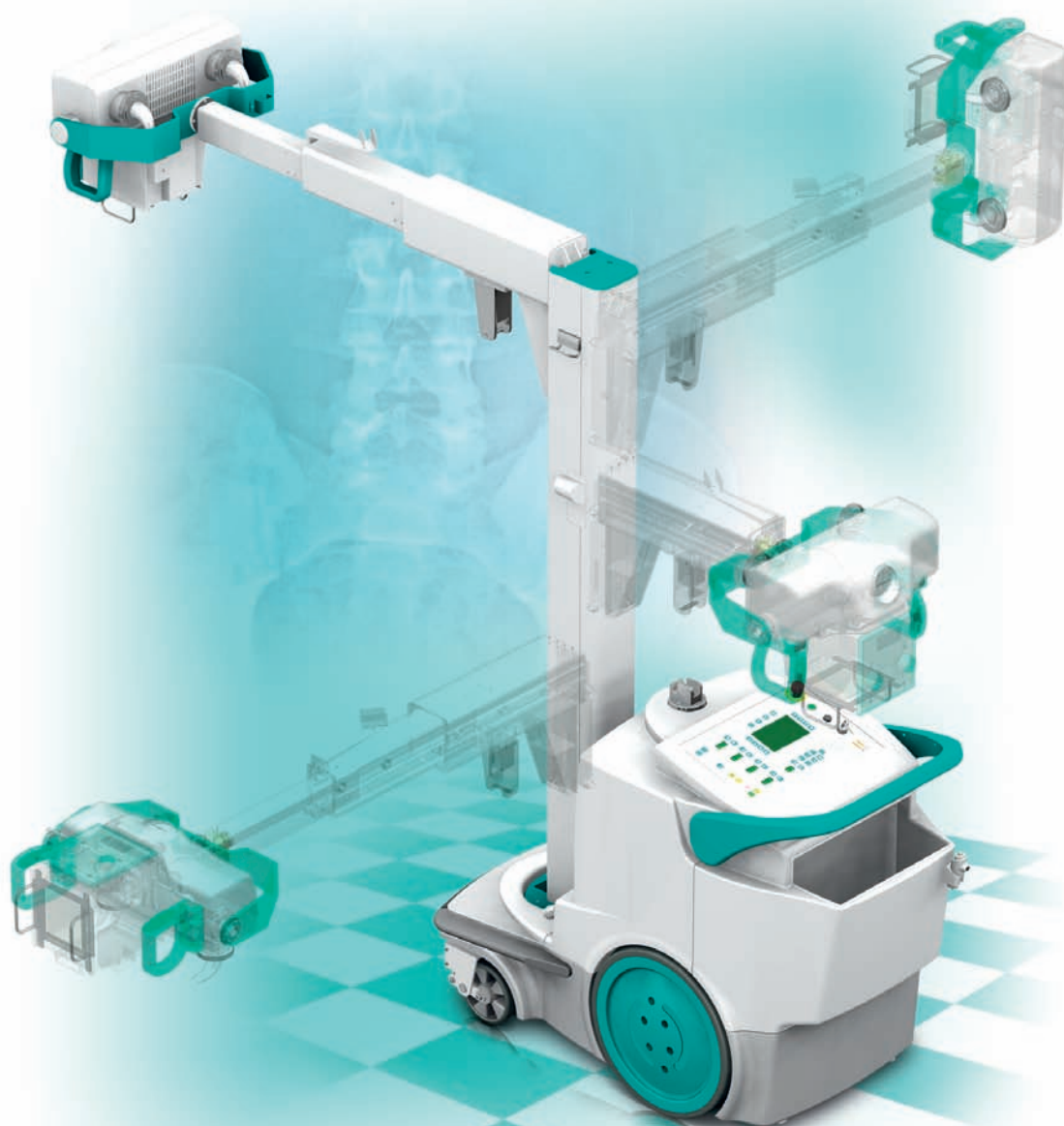

Przewoźne aparaty RTG serii TX

Wygoda i funkcjonalność

TX-PLUS-4

Najnowsze technologie

TX-PLUS-4 wyposażony jest w generator o częstotliwości 300 kHz, co pozwala na zmniejszenie wymiarów i wagi urządzenia w stosunku do przewoźnych aparatów RTG starszych generacji. Urządzenie dostarczane jest w konfiguracjach umożliwiających zarówno analogową, jak i cyfrową (CR, DR) akwizycję obrazów.



Najmniejsza waga

Waga urządzenia to jedynie 60 kg. Dzięki temu TX-PLUS-4 jest łatwo pozycjonowany i transportowany, a bariery architektoniczne (progi, wjazdy do wind) przestają być problemem.

Najwyższe parametry


Możliwość zasilania napięciem od 90 do 264 V oraz najwyższe parametry ekspozycyjne

- zakres regulacji napięcia $40 \div 115$ kV
 - zakres regulacji prądu $5 \div 100$ mA
 - zakres regulacji ładunku $0,1 \div 250$ mAs
 - zakres regulacji czasu ekspozycji $0,001 \div 10$ s
- sprawiają, że TX-PLUS-4 nie ma sobie równych w klasie aparatów do 5 kW.



TX-B

TX-B to rodzina przewoźnych aparatów RTG, w których zarówno układy napędowe, jak i generator RTG, są zasilane akumulatorowo.

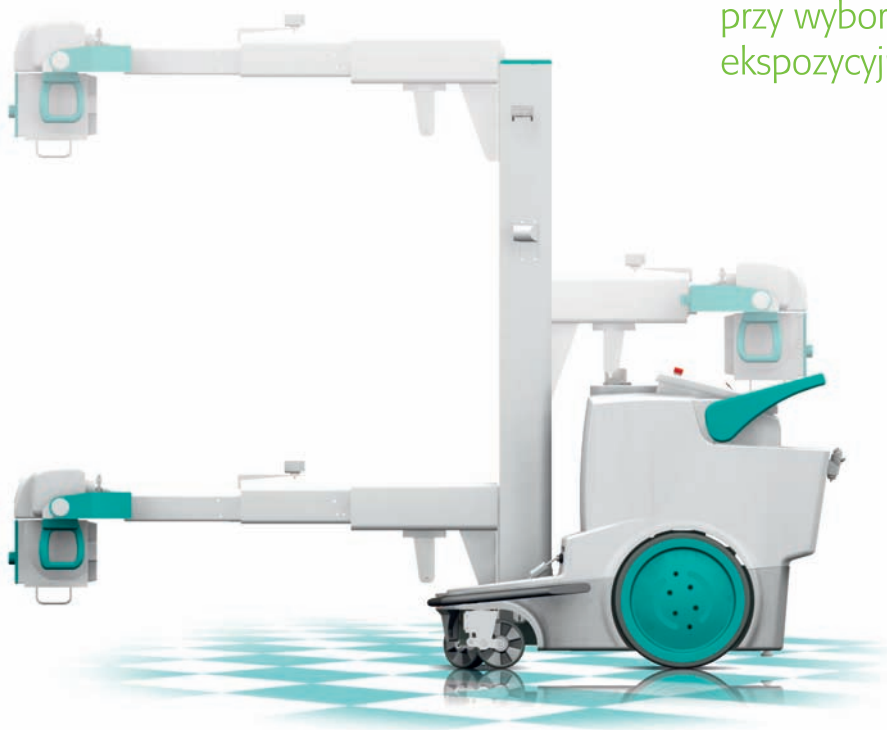

Szeroki zakres zastosowań

Urządzenie dedykowane jest do wykonywania wszystkich typów procedur radiograficznych w warunkach oddziałów ratunkowych, bloków operacyjnych oraz oddziałów szpitalnych (np. ortopedia, pediatria).

Moc generatora do 50 kW, lista programów anatomicznych oraz fabrycznie przewidziana możliwość współpracy z elementami wyposażenia dodatkowego

- ruchome kratki przeciwrzproszeniowe
 - systemy automatyki zdjęciowej
 - zdalne wyzwalacze ekspozycji
 - układy pomiaru dawki
- umożliwiają pracę urządzenia również w stacjonarnych warunkach pracowni RTG.

Pełna funkcjonalność

Lampa umieszczona na teleskopowym ramieniu obrotowej kolumny zapewnia najwyższy komfort pracy operatora przy wyborze optymalnej pozycji ekspozycyjnej.

Łatwość pozycjonowania

Unikalny system sterowania ruchami aparatu eliminuje potrzebę używania siły przy manewrowaniu urządzeniem.

Dodatkowe przyciski umieszczone przy lampie RTG umożliwiają sterowanie położeniem aparatu bez utraty widoczności pola ekspozycyjnego.





MEDIX

ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa
tel. 22 516 98 60
fax 22 610 37 77
info@medix.com.pl
www.medix.com.pl